

本製品は使い捨てではなく、何度でも繰り返しご使用になれます。

皺取麗子[®]


しわ とり れい こ

皺取麗子はシリコン素材の美容用具です


米国では人体に無害なシリコンシートが色々なところで使われています。その一つとして手術やケガの傷痕を修復させることにも使われ、大きな成果が実証されてきました。そのシリコンシートを美容向けに使い易く改良したものが「しわとりれいこ」なのです。毎日、一日20〜30分を目安にお使い下さい。



【シワの有る肌の状態】

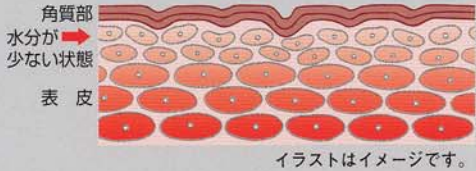

【シリコンシート装着時】

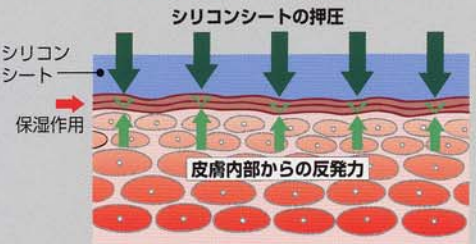

Q: なぜシワができるのでしょうか?
 A: 皮膚の水分が減ってくるのが最も大きな原因です。
 Q: なぜシワが薄くなるのでしょうか?
 A: シワが薄くなっていくのには大きく分けて2つの理由が考えられます。
 ①シリコンで皮膚の表面が塞がれますので、皮膚の細胞内に水分が溜まり皮膚が膨らんでくるからです。
 ②そして大きな理由として、皮膚の表面がシリコンによって常に保湿を行いながら平らに押えられているために、皮膚はその平らになった状態を変化・維持しようとします。これは皮膚の持っている生理作用によるものです。ですから付けている時間が長い程、変化がより早く現れるようになるのです。
 変化の度合いは個人によって異なりますが、遅い人でも2〜3週間、早ければ1〜2週間程度で変化を実感できます。
 この「しわとりれいこ・新ソフトタイプ」は皮膚に水分が溜まった状態で押しつけていますので、シワを伸ばす方法としては最も安全かつ、理想的な方法と言えます。

元 九州大学薬理学教授 / 現 産業医科大学名誉教授 医学博士 菅野 久信



目下専用 皺取麗子[®] しわとりれいこ

目ぶくろのタルミ対策に

HIGH GRADE しわとりれいこ・ハイグレード

皺取麗子[®]

ソフトな肌感触はそのままにさらに粘着性がアップ。ご要望の多かった目下専用です。皺取麗子は何度でも繰り返しご使用になれます。

目下専用

税別 **1,480円**

目ぶくろ専用 (目下) × 2枚
 ◎パッケージサイズ (ヘッドさき) 214 × 100mm
 税別 **1,480円**

汎用&ビッグサイズ しわとりれいこ・ハイグレード

ピタッと貼付くソフトタイプ

皺取麗子[®]

目尻 目下 ほうれい線に

ソフトな密着感で何処でも使えるビッグサイズ

●繰り返し何度でも使えます。●専用ケース付

HIGH GRADE しわとりれいこ・ハイグレード

皺取麗子[®]

◎パッケージサイズ (ヘッドさき) 235 × 117 × 16mm
 税別 **2,480円**

ほうれい線・目尻・口鼻脇兼用 × 計2枚 (専用ケース付)
 ◎パッケージサイズ (ヘッドさき) 235 × 117 × 16mm
 税別 **2,480円**

HIGH GRADE しわとりれいこ・ハイグレード

皺取麗子[®] ソフト & フイット

何度でも繰り返しご使用になれます。目尻・目下・口鼻脇兼用 計4枚・専用ケース1個

Special Wrinkle Silicon Patch

Not disposable

118mm 75mm 16mm

税別 **5,800円**

フルセット (専用ケース付)
 ◎目尻・目下・口鼻脇兼用 × 計4枚 ◎額用 × 1枚
 ◎箱サイズ 233 × 156 × 16mm
 税別 **5,800円**